



Home use IPL beauty device

Model: Melovi

MY International



ميلوڤي

Supreme beauty own the world

## ٢. التعريف بالمنتج

### (1) محتويات العلبة



جسم الجهاز مع لمبة



نظارة حماية العين



قابس الكهرباء



دليل المستخدم

## ١. نبذة عن المنتج

- دليل المستخدم هذا سيأخذك خطوة بخطوة بطريقة استخدام جهاز ميلوفي المطور نحن نتبع سياسة تطوير ثابتة ومستمره. ولهذا نتوقع تطوير دائم في امكانيات الجهاز
- وشكله دون أن يتم الاعلان عن ذلك مسبقا
- اذا كان هناك اختلاف بين الوصف المتاح والمنتج الاصلي ، فالاعتماد دائما يكون علي المنتج الأصلي
- نرجو منك استخدام الجهاز بناء علي خطوات التشغيل المذكورة

### 5 مكونات الجهاز



### 3 الوظائف

يحتوي الجهاز على 3 وظائف مختلفة تحصيلين عليها فقط بتغيير اللمبة (صورة 1)

الوظيفة الأولى: إزالة الشعر  
الوظيفة الثانية : نضارة وشد الجلد (اختياري)  
الوظيفة الثالثة: علاج حب الشباب (اختياري)



(إزالة الشعر)



(النضارة وشد البشرة)



(لعلاج حب الشباب)

### 4 المعايير القياسية

- مدخل الطاقة : 36 وات
- درجة الحرارة عند التشغيل : 5 - 35 درجة مئوية
- معدل الفولت : 100 - 240 فولت
- درجة حراره التخزين: من 0 - 45 درجة مئوية
- التيار المتردد: 50 / 60 هرتيز
- معدل الرطوبة اثناء التشغيل 25 % - 75 %

### ٣. نبذة عن المنتج

- ❌ لا يجب استخدام الجهاز في الأماكن التي يكون فيها الجلد ملتهب أو قد سبق وتعرض لحمام شمسي
- ❌ لا تستخدم الجهاز في فترة الحمل أو فترة الرضاعة، التغيرات الهرمونية المصاحبة لفترة الحمل أو فترة الرضاعة قد تتسبب في زيادة حساسية الجلد مما قد يتسبب في إصابته
- ❌ لا ينبغي لمريض الصرع أو مريض التشنجات التي تنشط بالضوء استخدام هذه المعالجة
- ❌ لا يستخدم الجهاز على الوشم أو على الزوائد الجلدية السوداء أو البنية الداكنة أو الحسنة أو الحناء
- ❌ حيث أنها تمتص ضوء أكثر مما قد يتسبب في تورم في الجلد مؤقت أو تغيير في لون المكان المعالج

- ❌ لا يستخدم الجهاز على الحلقات أو المشفرين أو حول فتحة الشرج
- ❌ استخدام الجهاز في هذه المناطق قد يتسبب في تورم الجلد أو بثور أو تغيير في لون الجلد مؤقت سواء بالتفتيح أو بالتسمير
- ❌ لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك حالة مرضية نشطة في المنطقة المعالجة مثل الأكزيما أو التهاب أو الدمامل أو الخراج أو مرض الهيربس أو البثور أو الحروق هذه الحالات قد تجعل الجلد أكثر حساسية و تجعل المعالجة غير مريحة و قد تتسبب في تورم الجلد أو بثور أو زيادة الحالة. وإذا كنتي تري أن الجلد تحسنت حالته بالمقدار الكافي فالأفضل مراجعة الطبيب
- ❌ لا يستخدم في الحالات المرضية بالجدره الجلدية و المعروف حساسيتها للضوء و مع الأدوية المعروف عنها أنها تزيد حساسية الجلد للضوء ومن ضمنها الأدوية المضادة للإلتهاب الغير استيرويديه مثل السلفوناميد و الاكوتان و البيتا هيدروكسي اسد والرتين ايه والروتينات الموضعية والفلوروسيل والثيازيد والسلفوناييل يوريا
- ❌ لا يستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من امراض متعلقة بالحساسية للضوء مثل البوليمورفك اربشن أو الأرتيكاريا الضوئية وغيرها
- ❌ هذه الحالات قد تجعل الجلد أكثر حساسية و تجعل المعالجة غير مريحة وقد تتسبب في تورم الجلد أو بثور أو زيادة الحالة

## ٤. تنبيهات التشغيل

غير مسموح بتشغيل الجهاز بدون أن تكون اللعبة في مكانها. ويمكنك استبدال اللبنة في حالة ما إذا كان القابس مفصول عن التيار الكهربائي، وخلال التشغيل يجب تفادي إغلاق فتحات التهوية الجهاز المساعدة على الحفاظ على حرارة تشغيل مناسبة .

ارتدي النظارة أثناء المعالجة ولا تنظري مباشرة للضوء أو تضعي الضوء مباشرة على العين .

اللبنة غير مهيئة لإعادة التدوير ، تعاملها معها وفقا للقوانين المحلية لبلدك قبل المعالجة ، نرجو تنظيف الجلد جيداً، ويجب إزالة أي مساحيق تجميل أو كريمات لتفادي الأضرار بالجلد أو بالجهاز .

ابدائي باستخدام الجهاز من درجة طاقة قليلة ثم قومي برفعها تدريجياً لضمان الأمان، تحصيلين مع الدرجة العالية نتيجة أفضل ومع الدرجة المنخفضة أمان أكثر من الطبيعي أن يحصل إحمرار خفيف للجلد بعد المعالجة، وننصح باستخدام أكياس الثلج أو كمادات باردة

إستخدمي مرطب للجلد و واقفي من الشمس بعد المعالجة. ويفضل أن يكون المرطب مستخلص من نباتات طبيعية و غير معطر .

بعد المعالجة أغلقي الجهاز، واستعملي قطعة من القطن أو قطعة من قماش رطب بالماء وقومي بتنظيف مقدمة الأمية الملامسة للجلد. هذا يساعد على تفادي بقاء الشعر وأجزاء الشعر المحترق بالأمية والتي قد تؤثر على الطاقة الصادرة من الجهاز

لتنظيف جسم الجهاز استخدمي قطعة قماش جافة

لا تجعلي أجزاء الجهاز تلامس الماء أو السوائل وكذلك لا تضعي في مكان رطب


قومي بتخزين الجهاز في مكان جاف واحتفظي به بعيداً عن متناول يد الأطفال

تحذر من وضع قطع معدنية في فتحات التهوية للجهاز لأنها قد تسبب الصعق بالكهرباء

في حالة ما اذا سقط الجهاز في الماء نرجو سرعة فصله من التيار الكهربائي وقبل لمس الجهاز

يحتوي الجهاز على شواحن تحتفظ بطاقة عالية لشحن لمبة التشغيل وعليه يمنع فتح الجهاز أو محاولة اصلاحه و يجب إعادته للمصنع

ومؤشر درجة الحرارة، مؤشر مروحة التبريد كما هو موضح في (صورة 4) لمبات الحالة ( الموجودة علي جانبي الجهاز ) ستضيء بشكل متقطع مما يعني أن الجهاز في وضع الإستعداد  
بعد وضع النافذة الأمامية المية على الجلد ، لمبة الحالة ستضيء بالأخضر مما يعني أن الجهاز مستعد لبدء الضربات

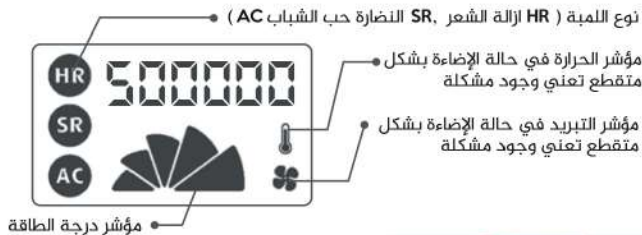

اضغطي زر التشغيل بشكل متكرر لتعديل مستوى الطاقة من الدرجة المنخفضة الي الدرجة الأعلى المستوي 1 هو الأقل في الدرجة والمستوي 5 هو الأعلى اجعلي نافذة اللعبة تلامس الجلد بشكل جيد وبشكل عمودي ( صورة ). ميلوفي ستنطفئ بشكل تلقائي اذا لم يتم تشغيلها خلال 5 دقائق



## ٥. طريقة استخدام ميلوفي

قومي بتنظيف النافذة الأمامية لللمبة بقطعة قماش رطبة أو بقطنه صغيرة وذلك لإزالة الأتربة وبقايا الشعر من قطعة المعالجة  
أمسكي الأمية من الأعلى والأسفل جيداً و قومي بتركيبها جيدا بالجهاز كم هو موضح في (صورة 3)



قومي بتوصيل كابل الكهرباء مع جهاز ميلوفي  
أبعدي أي سوائل عن مكان التشغيل وضعي الجهاز في مكان ثابت  
تأكدي أن اللمبة موصلة جيدا قبل ضغط زر التشغيل  
بعد توصيل الكهرباء إلى الجهاز ستشير لمبة الوضعية الموجوده على جانبي الجهاز بوميض أخضر بطيئ  
اضغطي زر التشغيل لمدة ثانيتين سيبدأ الجهاز بالعمل و ستبدأ الشاشة بالاضاءة وستبدأ مراوح التبريد بالعمل وسيظهر على الشاشة : مستوى الطاقة علي المستوى الأول

## ٨. طريقة التشغيل

إزالة الشعر باستخدام ميلوفي اختارة إزالة الشعر

أولاً : التطبيقات

شعر الشفة العلوية، شعر الإبط، شعر الجسم، الأرجل، شعر الجبهة الأمامية وشعر منطقة bikini .

فاعلية الجهاز تتأثر بلون الشعرة ولون الجسم ولا يؤثر الجهاز على الشعر الأبيض

جدول مقارنة لون الجلد مع لون الشعرة

لون البشرة لون الشعر	بياض الثلج	أبيض	قمحي	بني فاتح	بني	أسود/بني داكن
أسود	✓	✓	✓	✓	✓	✗
بني غامق	✓	✓	✓	✓	✓	✗
بني	✓	✓	✓	✓	✓	✗
ذهبي	✓	✓	✓	✓	✓	✗
أحمر	✗	✗	✗	✗	✗	✗
رمادي	✗	✗	✗	✗	✗	✗
أبيض	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✗ (غير مسموح باستخدام الجهاز) ✓ (مسموح)

## ٦. اختبار حساسية الجلد

إذا كنت تستخدمين الجهاز لأول مره أو كنت تستخدميه لمنطقة جديدة في الجسم فعليك اختيار منطقة صغيرة قريبة من منطقة المعالجة. وذلك لعمل اختبار لحساسية الجلد

استخدمي ميلوفي علي درجة منخفضة واتبعي تعليمات التشغيل في الفقرة رقم 7 التالية ولكن تأكدي من عدم اطلاق أكثر من 3 الي 3 نبضات فقط

بعد الإختبار انتظري 60 دقيقة ثم تأكدي من ردة فعل الجلد

بعد 60 دقيقة إذا كان الجلد طبيعي، ولاحظتي عدم وجود إحمرار أو إنتفاخ أو بثور في مكان الإختبار أو أي ردة فعل غير طبيعية، فيمكنك عمل معالجة كاملة

## ٧. اختبار حساسية الجلد

إختاري درجة الطاقة المناسبة للون جلدك وحساسيته وابدئي من الدرجة 1 الي الدرجة 5 تدريجياً. اذا لم تلاحظي تغير أو احتراق للشعر في مكان المعالجة يمكنك رفعها للمستوي الذي يليه. لا تقومي باطلاق عدة نبضات في نفس مكان المعالجة حركي الجهاز في عدة مناطق عند اختبار كل مستوي طاقة

حيث أن إطلاق عدة نبضات في نفس المكان قد يؤدي إلى تراكم الحرارة فينفس المكان وقد يؤدي إلي تورم أو بثور أو تغير مؤقت أو دائم في لون الجلد مع إطلاق كل نبضة حركي نافذة الأمية في منطقة مجاورة وانتظري لعشرين ثانيه قبل المحاولة مره أخرى

## ثانياً: خطوات المعالجة

- خطوة 1: أحلقي مكان المعالجة قبل الجلسة ب 24 ساعة
- خطوة 2: نظفي مكان المعالجة جيداً قبل الجلسة مباشرة وأزيلي أي كريمات أو مساحيق تجميل
- خطوة 3: ارتدي نظارة الحماية المرفقة مع ميلوفي حيث أن الضوء قد يسبب التهاب للعين
- خطوة 4: اختاري درجة الطاقة المناسبة (راجعني فقرة 7 اختيار الطاقة ) وابدئي من الدرجة الأقل للدرجة الأعلى
- خطوة 5: اجعلي نافذة اللبنة تلامس الجلد مباشرة و اجعلي جسم الجهاز بشكل عمودي علي الجلد وحركي الجهاز بانتظام علي الجلد ولا تعيدي علي نفس المكان مرتين
- خطوة 6: كرري الخطوة 4 بانتظام وبشكل متلاصق في منطقة المعالجة
- خطوة 7: استخدمني كريم مضاد للالتهاب مرتين الي ثلاثة في اليوم
- خطوة 8: اغلقي الجهاز بالضغط علي زر التشغيل الايقاف و تنظفي النافذة الأمامية بقطعة قطن
- خطوة 9: ضعي الجهاز والملحقات في الصندوق واحفظيها في مكان آمن

## ثالثاً: خطة العلاج

- قد تحتاجين من 7 الي 9 جلسات للحصول علي النتيجة المرجوة في اول 3 جلسات ، استعملي الجهاز كل اسبوع مره من الجلسة الرابعة إلي التاسعة استخدمني الجهاز مره كل اسبوعين الي 3 أسابيع حسب سرعة نمو الشعر لديك وبعد ذلك استخدمني الجهاز كلما وجدتني ظهور الشعر وإذا كان الشعر غير كثيف في أول 3 جلسات ، استعملي الجهاز كل أسبوعين مره من الجلسة الرابعة إلي التاسعة استخدمني الجهاز مره 4 أسابيع حسب سرعة نمو الشعر لديك

## لاستخدام ميلوفي في نضارة البشرة وتنعيم الجلد استخدمني لمبة النضارة

أولاً: التطبيقات : تستخدم لعلاج الجلد الخشن وشيخوخة الجلد وعلاج المسامات الواسعة والتجاعيد وللجلد الفاقد للحوية والمرونة والجلد الباهت أو الفاقد للمعان

### ثانياً خطوات الإستخدام

- خطوة 1: قومي بتنظيف منطقة المعالجة
- خطوة 2: ارتدي نظارة الحماية
- خطوة 3: اختاري درجة الطاقة المناسبة (راجعني فقرة 7 اختيار الطاقة ) و ابدئي من الدرجة الأصغر للدرجة الأعلى
- خطوة 4: اجعلي نافذة الأمية تلامس الجلد مباشرة واجعلي جسم الجهاز بشكل عمودي علي الجلد وحركي الجهاز بانتظام علي الجلد ولا تعيدي علي نفس المكان مرتين
- خطوة 5: كرري الخطوة 4 بانتظام وبشكل متلاصق في منطقة المعالجة
- خطوة 6: استخدمني كريم مضاد للالتهاب مرتين الي ثلاثة في اليوم
- خطوة 7: اغلقي الجهاز بالضغط علي زر التشغيل الايقاف و تضي النافذة الأمامية بقطعة قطن
- خطوة 8: ضعي الجهاز والملحقات في الصندوق واحفظيها في مكان آمن

### ثالثاً: خطة العلاج

8 معالجات مره كل اسبوع

SR HR



## ٩. الضمان

### (1) فترة الضمان

جسم الجهاز: لمدة سنتين من تاريخ الشراء  
اللمبة: التي تتعطل لأسباب صناعية وليس لسوء الإستخدام أو الكسر مع عدد ضربات متبقية أكثر من 30٪ فاننا نقوم بصيانتها مجاناً

### (2) تغطية الضمان

إذا كان الجهاز داخل فترة الضمان فإن الشركة تضمن إستبدال الجهاز إذا كان العطل الأسباب صناعية وليس لسوء الإستخدام أو الكسر. الأعطال التي تكون ناتجة عن سوء الإستخدام أو الكسر أو السقوط أو الحرق فإنها خارج تغطية الضمان

### (3) حدود الضمان

عند التقدم بطلب صيانه خلال فترة الضمان فانه يجب تقديم مايبثت تاريخ الشراء (فاتورة شراء و كرت الضمان )  
الصيانة المجانية لا تقدم إذا وصل الجهاز الشركة في حالة كسر أو سوء استخدام الشركة غير مسؤله عن الحالات التالية

## لإستخدام ميلوفي في علاج حب الشباب اختاري لمبة علاج حب الشباب AC

### أولاً: التطبيقات

تستخدم للبشرة الدهنية و التي تكثر فيها الحبوب أو مع القوباء أو الحفص الجلدي أو حبوب الشباب التي تشكل حويصلات أو حويصلات ملتهبه

### ثانياً خطوات الاستخدام

خطوة 1: قومي بتنظيف منطقة المعالجة

خطوة 2: ارتدي نظارة الحماية

خطوة 3: اختاري درجة الطاقة وابدئي من الدرجة الأصغر للدرجة الأعلى

خطوة 4: اجعلي نافذة الأمية تلامس الجلد مباشرة واجعلي جسم الجهاز بشكل عمودي علي الجلد وحركي الجهاز بانتظام على الجلد، اعيدي المعالجه على نفس المكان مره اخري بود 20 ثانية

خطوة 5: كرري الخطوة 4 بانتظام وبشكل متلاصق في منطقة المعالجة علي المنطقة التي تحتوي علي حب الشباب فقط

خطوة 6: استخدمي كريم مضاد للالتهاب مرتين الي ثلاثة في اليوم

خطوة 7: اغلقي الجهاز بالضغط على زر التشغيل الايقاف و نظفي النافذة الأمامية بقطعة قطن

خطوة 8: ضعي الجهاز والملحقات في الصندوق واحفظيها في مكان أمن

### ثالثاً: خطة العلاج

10 معالجات مره كل 3 ايام علي حب الشباب فقط  
ويجب استخدام كريمات الترطيب والمضادة للالتهاب



## ولا يحق المطالبة بالصيانة في الحالات التالية :

- أ. الأعطال التي تنتج نتيجة للاشتعال أو الحريق أو للحوادث الطبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير أو تدخل طرف ثالث أو الأعطال التي تنتج نتيجة للتشغيل في ظروف غير طبيعية أو في حوادث غير متوقعة
- ب. الأعطال التي تحدث في فترة التغيرات الحكومية أو البنكية غير المتوقعة أو بسبب التغير في القوانين والانظمة والتي تمنع الشركة و الوكلاء من ممارسة نشاطهم الطبيعي و اشهار الافلاس وغيرها
- ج. الأعطال التي تحدث نتيجة لعدم الالتزام بإرشادات المصنع
- د. بالإضافة الى الأعطال التي تحدث في الوضع غير المتحكم بها مثال إذا كانت القطع التي يطلبها العميل كماليات لا تباع من قبل الشركة ولا تؤثر في العمل الخاص للجهاز
- هـ. الأعطال التي تحدث نتيجة تشغيل الجهاز في المناخات الخارجة عن درجة تحمل الجهاز
- و. الأعطال التي تنتج نتيجة التخزين السيء من قبل المستخدم ( مثل ) أعطال التي تحدث بسبب القوارض أو الاتربة أو الغماس في الماء أو تسرب الماء

ميلوڤي  
MELOVI



Home use ..



User Manual